

SARL SKALBEL SANTE

FICHE TECHNIQUE

EQUIPEMENT : Unité électrochirurgicale
MARQUE : elektromag
REFERENCE : Série H 400w

UNITE ELECTROCHIRURGICALE – Série H 400 W

1. Description :

Unité électro chirurgicale polyvalente permettant la coupe et la coagulation des tissus biologiques avec haute précision grâce à un contrôle électronique avancé.

Adaptée à la chirurgie générale et aux procédures endoscopiques.

2. Caractéristiques Générales :

2.1 Technologie et Modes de Fonctionnement :

✓ Modes de coupe


- Pure Cut (coupe pure)
- Cut 1 (coupe modérée)
- Cut 2 (coupe douce)

✓ Modes de coagulation

- Coagulation standard
- Coagulation douce (Soft coag)
- Coagulation par vaporisation (Spray)
- Coagulation bipolaire

2.2 Performances :

Paramètre	Valeur
Puissance max coupe	400 W
Pure Cut	jusqu'à 350 W
Cut 1	jusqu'à 200 W
Cut 2	jusqu'à 120 W
Coagulation standard	100 W
Coagulation vaporisation	150 W
Coagulation douce	80 W
Coagulation bipolaire	70 W

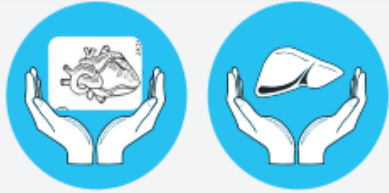

SARL SKALBEL SANTE

FICHE TECHNIQUE

EQUIPEMENT : Unité électrochirurgicale

MARQUE : elektromag

REFERENCE : Série H 400w

3. Technologie et contrôle

- Système de contrôle par **microprocesseur**
- Réglage précis et stable de la puissance
- Adaptation automatique selon l'impédance des tissus

4. Sécurité

- Système de surveillance de la plaque patient (REM)
- Alarme sonore et visuelle en cas de mauvaise connexion
- Protection contre les courts-circuits
- Vérification automatique du courant de sortie

5. Paramètres techniques

Paramètre	Valeur
Impédance	300 Ω
Fréquence de fonctionnement	360 – 460 kHz
Activation	Stylo ou pédale
Électrodes	Réutilisables

6. Caractéristiques électriques

Alimentation : 190 – 240 V

Fréquence réseau : 50 – 60 Hz


Consommation : \leq 1100 VA

Fusible : 3 A

Poids net : 10.5 kg

7. Accessoires

- Stylo électrochirurgical
- Pédale
- Plaque patient
- Câbles
- Électrodes

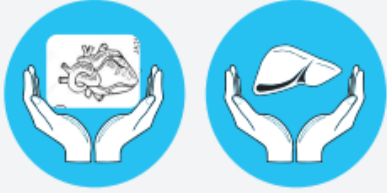

FICHE TECHNIQUE

EQUIPEMENT : Unité électrochirurgicale
MARQUE : elektromag
REFERENCE : Série H 400w

SARL SKALBEL SANTE

8. Image de produit :



**ESU Patient
Plate Cable**



**Electrosurgical
Pencil**



**Bipolar
Forceps**



Footswitch



**Bipolar
Forceps Cable**



**Surgical
Diathermy Plate**